

LE BON MÉLANGE DIE RICHTIGE MISCHUNG LA GIUSTA MISCELA THE RIGHT MIX

PX EXTRAROCK



PROPORTIONS DE MÉLANGE DES COMPOSANTS A ET B

Afin d'obtenir la bonne consistance du produit, il faut mélanger le composant A avec le composant B dans la proportion de 5:1 en poids.

Nous recommandons de peser chaque composant (en particulier pour les petites quantités) et ensuite de bien les mélanger.

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au mode d'emploi joint au produit.

MISCHVERHÄLTNISSE DER KOMPONENTEN A UND B

Um die richtige Konsistenz des Produktes zu erreichen, sollte die Komponente A mit der Komponente B im Gewichtsverhältnis 5:1 gemischt werden.

Wir empfehlen, jede Komponente (insbesondere bei kleinen Mengen) zu wiegen und dann gut zu mischen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung.

PROPORZIONI DI MISCELAZIONE DEI COMPONENTI A E B

Per ottenere la corretta consistenza del prodotto, il componente A deve essere miscelato con il componente B in un rapporto di 5:1 in peso.

Si consiglia di pesare ogni componente (specialmente per piccole quantità) e poi di miscelarli bene.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso allegate al prodotto.


MIXING PROPORTIONS OF COMPONENTS A AND B

In order to obtain the correct consistency of the product, component A must be mixed with component B in a ratio of 5:1 by weight.

We recommend weighing each component (especially for small quantities) and then mixing them well.

For further information, please refer to the instructions for use enclosed with the product.

A gr.	B gr.
10	2
15	3
20	4
25	5
40	8
50	10
75	15
80	16
100	20

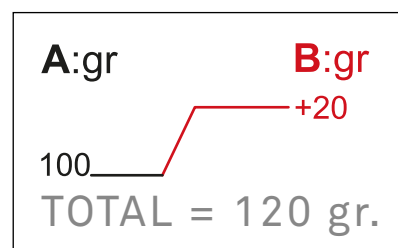

VERS:SAVRIL20218:52/PXEXTRAROCK_THERIGHTMIX_FR_DE_IT_EN